



A certeza de um sorriso atraente.

Confeccionado com material plástico transparente, CA® CLEAR-ALIGNER é praticamente invisível, e você ainda pode falar e sorrir durante o período do tratamento sem qualquer dificuldade. Isto garante seu conforto - quase imperceptível. Você vai perceber quando usá-los: os alinhadores são agradavelmente finos e confortáveis, livre de metais.

Quando for se alimentar ou escovar os dentes, basta remover seus aparelhos da boca. Rápido e sem complicações, sempre que quiser.

Processo do tratamento para o resultado ideal

1 Consulta

Pergunte ao seu dentista se o sistema CA® CLEAR ALIGNER é o tratamento ideal indicado para você.

2 Moldagem

As moldagens realizadas das arcadas dentárias são necessárias para iniciar o processo de produção dos alinhadores.


3 Confeção dos alinhadores

A produção dos alinhadores é controlada por computador e ocorre no laboratório, precisamente feita com exclusividade para você.

4 Tratamento

Seu dentista vai monitorar os resultados do tratamento regularmente enquanto você usa os alinhadores. Para alcance do resultado final planejado, são feitas moldagens sucessivas dos seus dentes e novos alinhadores são confeccionados progressivamente.

 CLEAR ALIGNER

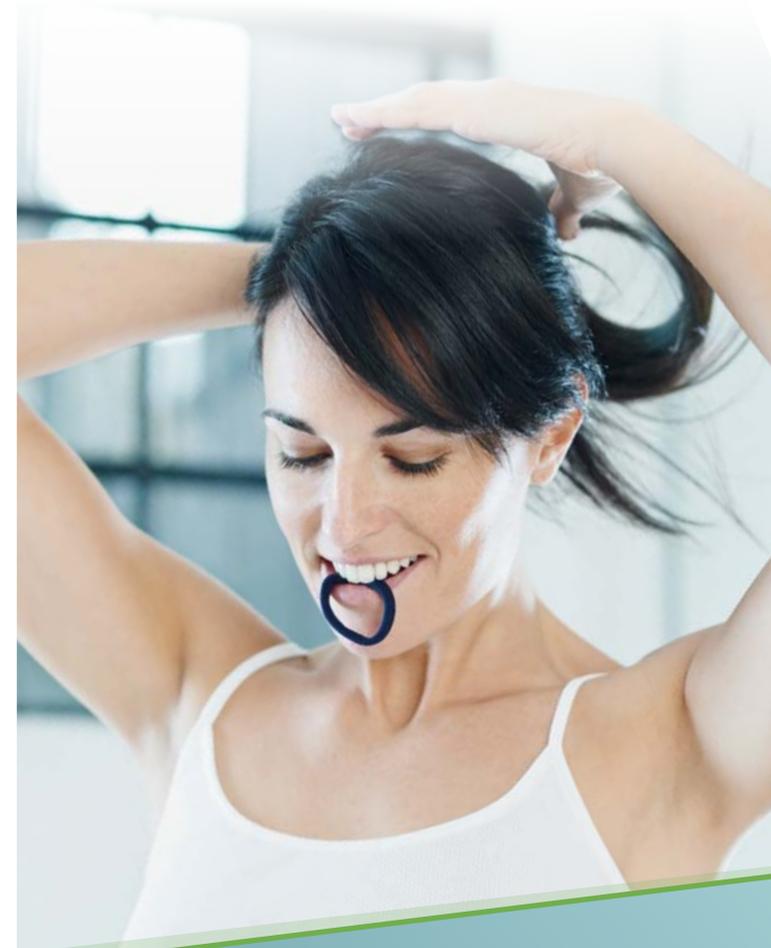

Seu sorriso a qualquer momento.

Para mais informações acesse:
www.ca-clear-aligner.com

CA® CLEAR ALIGNER: a maneira mais discreta de corrigir seus dentes.

CA[®] CLEAR ALIGNER: suave e moderno

Alinhar os dentes com os aparelhos estéticos CA[®] CLEAR ALIGNER representa um tratamento importante na ortodontia moderna. Especialmente para o tratamento de adultos, este conceito tem sido bem sucedido em muitos estudos clínicos. Ele garante ótimos resultados no tratamento com alto nível de conforto.

As aplicações clínicas para o inovador sistema CA[®] CLEAR ALIGNER são muitas e versáteis:

EXEMPLO 1



antes



EXEMPLO 2

Muitas vantagens para você:

eficaz

O tratamento irá proporcionar excelentes resultados em um curto espaço de tempo.

higiênico

Para um bom cuidado dos seus alinhadores, recomendamos o agente de limpeza CETRON[®].



removível

Os alinhadores podem ser facilmente removidos da boca a qualquer momento (por exemplo, para alimentação ou higiene oral).

custo-benefício

Em muitos casos, o tratamento é mais acessível do que outras opções.

transparente

Quase invisível, sem comprometer sua fala. Sorria sem restrição.

confortável

Os alinhadores são agradavelmente delicados, sem peças metálicas, parafusos ou fios.

O sistema inteligente de 3 alinhadores.

Sequências progressivas de 3 espessuras de alinhadores por mês para seu sorriso ideal:

Você usa 3 alinhadores para cada etapa de movimentação dentária planejada. Cada alinhador tem impressa a logomarca CA e espessura, facilitando a identificação e confirmando a autenticidade do produto

Através deste aumento suave e progressivo das forças, seus dentes são movimentados eficientemente de maneira confortável e discreta.

ETAPA 1	Semana	Espessura
ETAPA 1	Semana 1	soft
	Semana 2	medium
	Semana 3	hard
	Semana 4	hard
ETAPA 2	Semana 5	soft
	Semana 6	medium
	Semana 7	hard
	Semana 8	hard
ETAPA 3	Semana 9	soft
	Semana 10	medium
	Semana 11	hard
	Semana 12	hard

soft 0,5 mm

medium 0,625 mm

hard 0,75 mm

Consulte seu ortodontista sobre este tratamento. Ele poderá orientá-lo em detalhes.

www.ca-clear-aligner.com